


على القسطار. وقد يؤدي استخدام مثل هذه المواد إلى إعاقة توازن البالون أي المنطاد كما أنه قد يؤدي إلى انفجاره.


عدم استخدام أية مواد لزجة لتسهيل الإدخال والإنزلاق؛ لا توجد هناك أية حاجة لاستخدام المواد اللزجة لتسهيل الإدخال والإنزلاق كالفازلين على سبيل المثال وذلك بفضل طبقة الطلاء الموجودة

دور الرأس المتحرك ياتجاه رمز الماء وقرم بضخ الماء بتأنٍ وببطء في الأمعاء. دائماً بمقدار ١٠٠ ملتر تدريجياً حتى التوصل لكمية الماء الضرورية.


نصيحة: خلال تعبئة الماء دائماً التدوير ياتجاه رمز الماء من أجل تلافي ارتداد الماء الذي تمت تعبئته. بعد ذلك قمر بتدوير الرأس المتحرك لوحدة التحكم حتى يصل عند رمز الهواء. اسحب الآن الخرطوم بهدوء وببطء من أجل نزع القسطار المستقيمي.

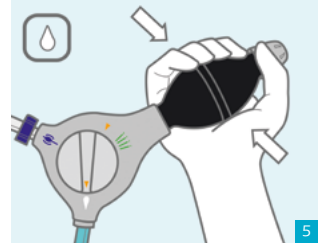

عليك البقاء جالساً على مقعد المرحاض. حتى تبدأ عملية إفراغ الأمعاء الذاتية. في حال لم يتم ذلك، يمكنك تفعيل إفراغ الأمعاء الذاتي من خلال تحريك الجزء العلوي من الجسد أو تدليل البطن أو السعال. تختلف مدة الإفراغ من شخص إلى آخر لكنها تستمر حسب التجربة حوالي ٣٠ دقيقة.

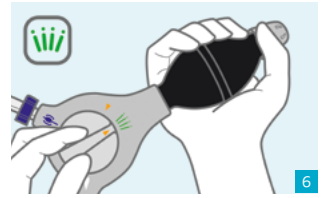

انزع القسطار المستقيمي من نظام الخرطوم وضعه مع القمامة المنزلية. قمر الآن بفصل الخرطوم عن الكيس وفرّغه من الماء المتبقي. دور الرأس المتحرك إلى الرمز البرتقالي، وبعد ذلك يمكنك تعليق مكونات النظام كي تجف.

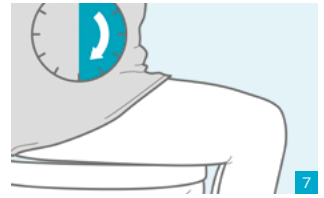

الإرواء الشرجي دائماً بنفس الوقت: يعتبر الوقت الأنسب لذلك هو ٣٠ دقيقة بعد تناول الفطور. ويمكن بدلاً عن ذلك القيام به بعد تناول طعام العشاء. المهم هو المحافظة على إيقاع منتظم.




القسطرة للنساء*

يرجى قراءة دليل التعليمات المرفق بدقة قبل استخدام المنتج.

قم بملء الكيس بالماء الفاتر (٣٦ - ٣٨ درجة مئوية) حتى مستوى الإشارة - صفر. اغلق الغطاء بعد التعبئة. يكون الإغلاق محكماً حين سماع صوت كليك Klick.


قم بوصل الخرطوم بالوصلة الرمادية على فتحة الغطاء الرمادي. قم بعد ذلك بإحكام تثبيتته على الوصلة وذلك من خلال تدويره بمقدار ٩٠ درجة بإتجاه عقارب الساعة.

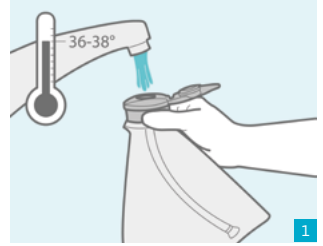

إفتح علبة القسطار فقط من خلال الجزء العلوي (٢ - ٣ سم). قم بإدخال القسطار المستقيمي فوق الخرطوم من خلال الوصلة الزرقاء ودوّر ذلك بمقدار ٩٠ درجة حتى التأكد من تثبيت الوصلة.



دوّر من فضلك الرأس المتحرك من أجل تفعيل طبقة الطلاء بإتجاه رمز الماء وقم بضخ الماء في علبة القسطار (٢ - ٣ دفعات ضخ). ثبت الرأس المتحرك على رمز البالون أي المنطاد، من أجل قطع تدفق الماء. إنتظر ٣٠ ثانية حتى يتم تفعيل طبقة الطلاء.

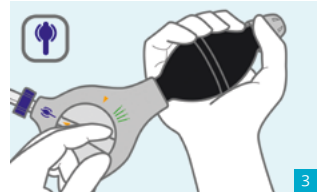

قم الآن بدفع القسطار بهدوء وتأنٍ وحذر حتى طرف المقبض وضخ مرة واحدة إلى مرتين من أجل حبس القسطار.

نصيحة: في حال تمت إعادة نزع البالون أي المنطاد من جراء السحب البسيط أو خرج بعض الماء، فينبغي في هذه الحالة ضخ الماء مرة ١ إضافية (أقصى حد الضخ ما مجموعه 3 مرات).

