

BoNee

DIE BESTELLNUMMERN

Artikelnummer	Für den Einsatz mit	Länge
NBI035	starrem Zystoskop	35 cm
NBI070	flexiblem Zystoskop	70 cm

VPE: EINZELN STERIL VERPACKT

 **Coloplast** and **BONEE** are registered trademarks of Coloplast or other companies
© 2007.09. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark - 230NUNOE67



Deutschland
Coloplast GmbH
Postfach 70 03 40
22003 Hamburg

Tel.: 0 40 / 66 98 07-77
Fax: 0 40 / 66 98 07-48
www.coloplast.de

E-mail: devks@coloplast.com

Österreich
Coloplast GmbH
Thomas-Klestil-Platz 10
1030 Wien

Tel.: 01 / 7 07 57 51 0
Fax: 01 / 7 07 57 51 30
www.coloplast.at

E-mail: atbestellung@coloplast.com

Schweiz
Coloplast AG
Euro-Business-Center
Blegistrasse 1
6343 Rotkreuz

Tel.: 041 / 799 79 79
Fax: 041 / 799 79 40
www.coloplast.ch

E-mail: swissinfo@coloplast.com

PORGES



Nadel für
die intravesikale
Injektion




BoNee
Coloplast

BoNee

Fixierung der Nadel

Mit dem Tuohy Borst Adapter kann die Nadel fest mit dem Arbeitskanal des Zystoskops verbunden werden.

- Vereinfacht die Punktion
- Ermöglicht eine Rotation

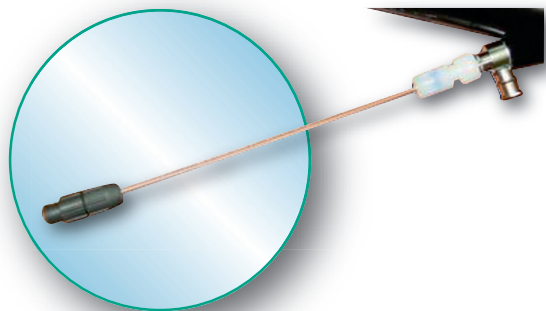


VON UROLOGEN ENTWICKELT, UM DIE INTRAVESIKALE INJEKTION ZU VEREINFACHEN

Verriegelung am
Zystoskop



Flexibler Schaft der Nadel in Fr/Ch 6.

- Kompatibel mit flexiblen und starren Zystoskopen
- Jeder Punkt der Blase wird erreicht, ohne dass die Nadel abknickt

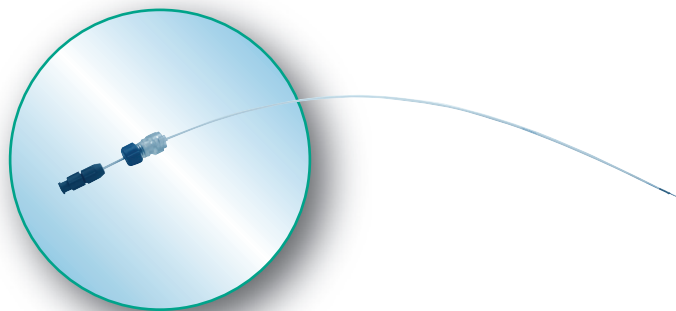

Flexibler Schaft
der Nadel in Ch. 6

Spitze der Nadel in 22 G MIT SCHUTZHÜLLE

- Vereinfacht die Punktion
- Die Manschette schützt den Arbeitskanal während des Einführens der Nadel*
- Mit Stichtiefenbegrenzung von 4 mm



* Die Schutzhülle soll erst dann abgezogen werden, wenn die Nadel durch den Arbeitskanal in das Zystoskop geschoben wurde und bevor das Gerät in die Urethra eingeführt wird.

Chiba-Nadelspitze
in 22 G mit
Schutzmanschette

