


# Mehr als nur ein Faserverband

Die Lösung für exzellentes Exsudatmanagement

**Biatain® Fiber**

# Klinische Herausforderungen

Gemäss einer Befragung von 2000 Fachkräften führen folgende Herausforderungen zu einer verzögerten Wundheilung.<sup>1</sup>

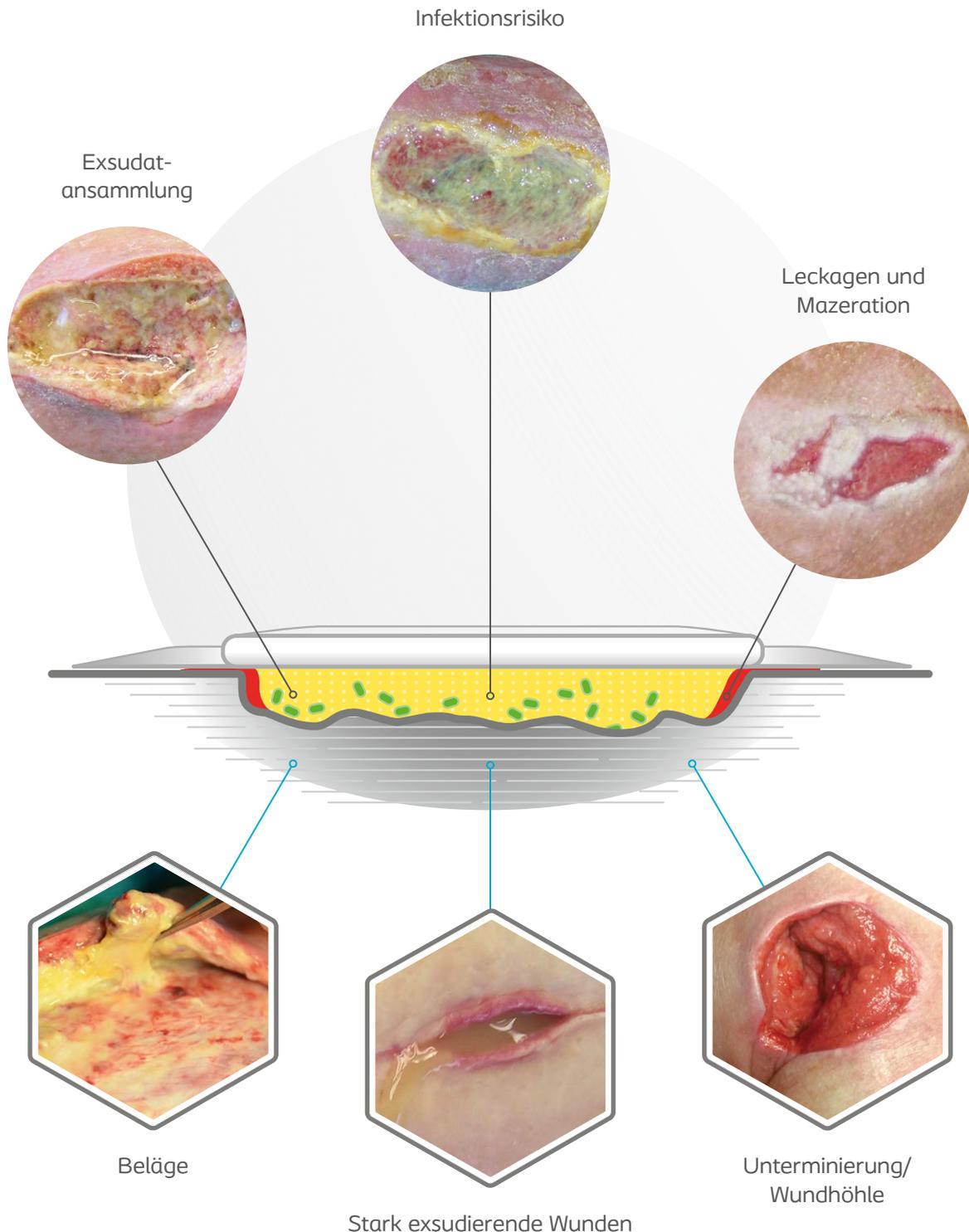

95% der Fachkräfte geben an, dass ein direkter Kontakt zum Wundgrund wichtig ist, um ein optimal feuchtes Wundheilungsmilieu zu schaffen.<sup>1</sup>

1. Digitale Umfrage unter 2000 Fachkräften, 2017


Für Wunden von 0 bis 2 cm Tiefe



Biatain® Silicone ist ein Schaumverband mit sanfter Silikonhaftung für die Versorgung von mittel bis stark exsudierenden Wunden.



Für Wundhöhlen, Unterminierungen, stark exsudierende und belegte Wunden

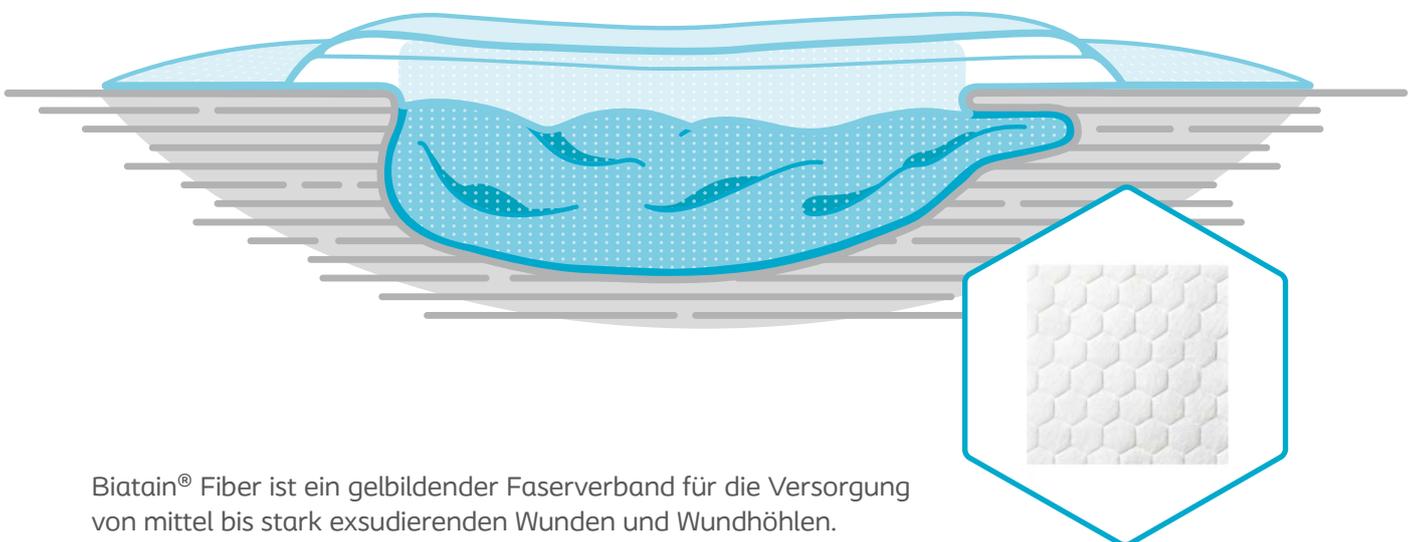

Biatain® Fiber ist ein gelbildender Faserverband für die Versorgung von mittel bis stark exsudierenden Wunden und Wundhöhlen.



### Schliesst Exsudat und Bakterien ein

Absorbiert vertikal und hält Exsudat und Bakterien effektiv zurück. So wird das Infektionsrisiko minimiert und der Wundrand geschützt.



### Minimales Schrumpfen

Minimiert das Risiko, dass sich Hohlräume und Exsudatansammlungen bilden.



### Formstabiles Gel


Einfaches Entfernen in einem Stück mit minimalem Risiko, Rückstände in der Wunde zu hinterlassen.

## Mehr als nur ein Faserverband


Die einzigartige HexaLock Technologie® integriert die gelierenden Fasern in ein verstärktes Hexagon-Netz, wodurch Biatain® Fiber die Stärke erhält, Exsudat einzuschliessen, um Exsudatansammlungen zu reduzieren und so optimale Heilungsvoraussetzungen zu schaffen.



Bikomponenten-Fasern werden zu den gelierenden CMC-Fasern für extra Stärke hinzugefügt.

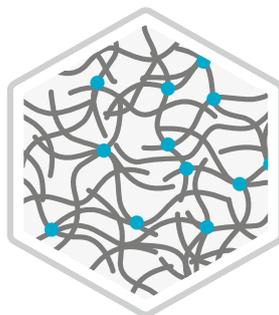

Die Fasern werden durch Thermobonding miteinander verbunden.

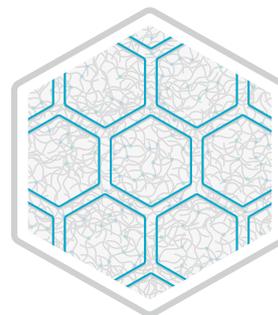

Der Verband wird zusätzlich mit einem Hexagon-Netz durch Ultraschall-Prägung verstärkt.



Überzeugen Sie sich selbst von den klinischen Vorteilen von Biatain® Fiber mit der HexaLock Technologie®.



## Bestellinformationen

Gelbildender Faserverband für mittel bis stark exsudierende chronische und akute Wunden und Wundhöhlen



reddot winner 2020  
innovative product

### Biatain® Fiber



Artikel-Nr.	Grösse/cm	St./VE	Pharmacode	MiGeL Nr.
335010	5 × 5	10	7749047	35.05.07.01.1
335030	10 × 10	10	7749048	35.05.07.02.1
335060	15 × 15	10	7749049	35.05.07.04.1
335070	19 × 25	10	7749050	35.05.07.05.1
335080	2,5 × 46 Tamponade	10	7749051	35.05.07.09.1

MiGeL Nr.: unverbindliche Empfehlung, jegliche Haftung ausgeschlossen



Zuschneidbar



Sekundärverband nötig



Mittel – Stark

Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen, um das Leben von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Anwendern entwickeln wir Lösungen, die ihren sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen gerecht werden.

Coloplast entwickelt und vertreibt Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege und die Urologie. Coloplast ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 12.000 Mitarbeitern.